



La puce noire reste à l'intérieur.
Une fois pour toutes.

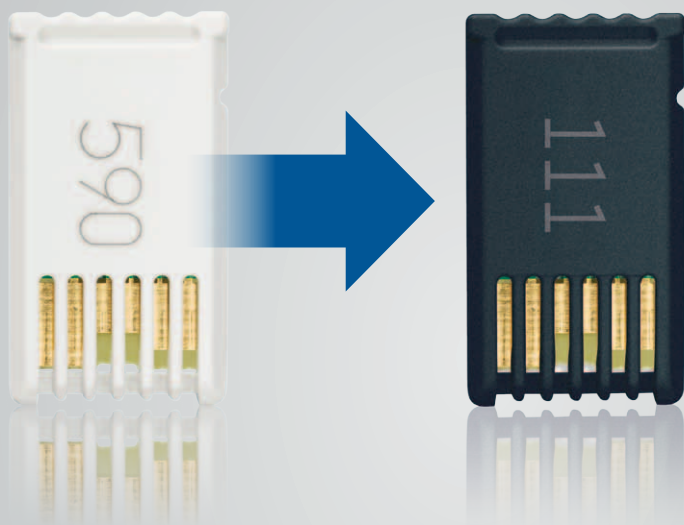


Réalisation d'une mesure de glycémie

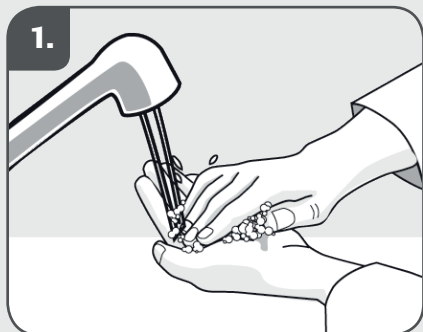

1. Lavez-vous les mains et essuyez-les avant d'effectuer une mesure de glycémie.



2. Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées. Retirez une bandelette réactive du tube, puis refermez-le directement.

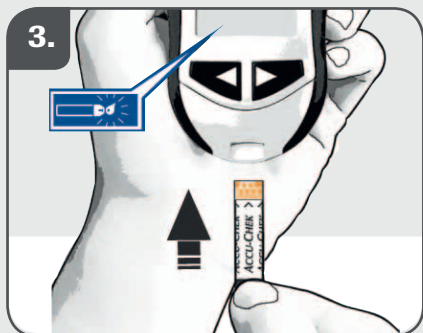

3. Insérez la bandelette réactive dans le lecteur en respectant le sens de la flèche. Le lecteur émet un signal sonore et le symbole d'une goutte de sang clignotante s'affiche.



4. Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté du doigt et enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'au bout.

Messages d'erreur



La bandelette réactive est peut-être endommagée ou ce n'est pas la bonne puce de calibration. Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la. Si le message s'affiche de nouveau, éteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce d'activation noire.



Ce n'est pas la bonne puce de calibration. Éteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce d'activation noire.



Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou qu'une erreur soit survenue au niveau du lecteur ou de la bandelette réactive.

- Si cela correspond à votre état de santé, contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais.
- Si le résultat ne correspond pas à votre état de santé, recommencez la mesure et reportez-vous au chapitre 2, «Résultats glycémiques inhabituels», du manuel d'utilisation.



La bandelette réactive n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que la mesure de glycémie ou le test de contrôle soit possible ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de la mesure de glycémie ou du test de contrôle. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.



Ce message pourrait s'afficher à l'écran si vous utilisez une puce de calibration blanche avec le lecteur. La puce de calibration provient d'un lot de bandelettes réactives périmé. Assurez-vous que l'heure et la date du lecteur sont correctes.



L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette réactive a été effectuée avant que ne s'affiche le symbole de la goutte clignotante à l'écran. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.



Une défaillance électronique s'est produite ou, ce qui est rare, une bandelette réactive usagée a été retirée du lecteur et réinsérée. Éteignez le lecteur puis rallumez-le ou retirez la pile pendant 20 secondes et réinstallez-la. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.




La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de températures préconisé, attendez 5 minutes et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.




La pile est presque à plat. Remplacez la pile maintenant.




Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez-les si nécessaire.

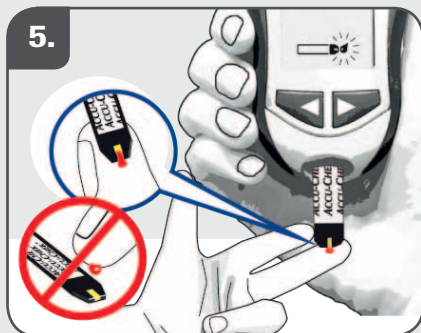


Mettez la goutte de sang obtenue en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.

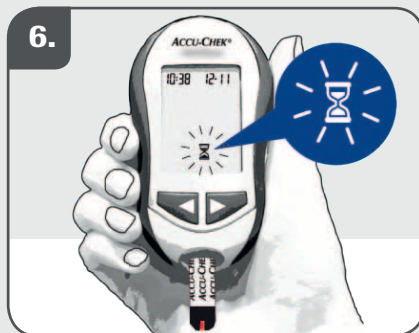

Le lecteur émet un signal sonore et  clignote à l'écran lorsque la bandelette réactive a aspiré suffisamment de sang.

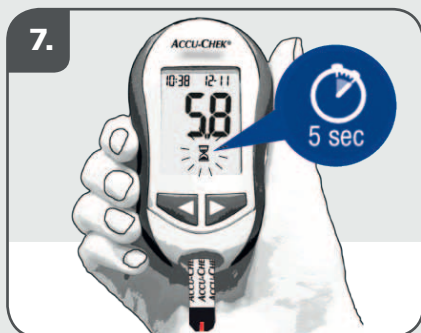

Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

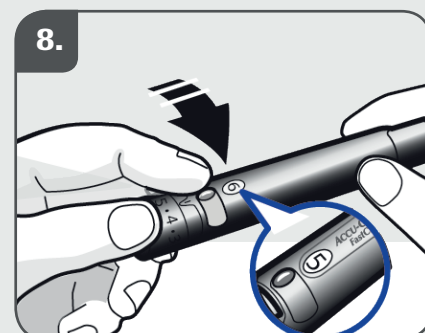

Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant un aller retour. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

Enlevez la puce de calibration blanche.
Insérez la puce d'activation noire
et laissez-la en place. Pour toujours.



Il n'y a pas plus simple!

- La puce d'activation noire remplace **définitivement** la puce de calibration blanche standard jusque-là incluse dans chaque boîte de bandelettes réactives Accu-Chek Aviva.
- Simplifie les analyses de routine en calibrant le lecteur une fois pour toutes.
- Réel gain de temps car cette méthode permet de simplifier la formation.
- Contribue à garantir la sécurité grâce à des résultats toujours précis et homogènes.
- L'avertissement d'expiration de la bandelette n'existe plus. Les patients doivent **toujours** vérifier la date d'expiration imprimée sur le flacon de bandelettes réactives.



Le patient enlève la puce de calibration blanche en place et **insère une puce d'activation noire**.



La puce d'activation noire reste en place. Il ne faut plus jamais l'enlever, même si les futurs boîtes de bandelettes réactives contiennent une puce d'activation noire ou une puce de calibration blanche.

Experience what's possible.

www.accu-check.ch

Roche Diagnostics (Suisse) SA
Industriestrasse 7 - 6343 Rotkreuz
Hotline diabète 0800 803 303

ACCU-CHEK®